

# thermoadvanced plus


minilandbaby.com

Medición en la frente · Forehead measurement · Medição de testa · Front mesure  
Messen front · Misurazione del fronte · Pomiar na czole · Измерение на лбу


1



2

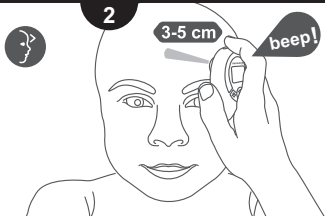

3

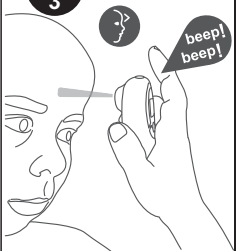

- Mantenga pulsado el botón de medida en la frente, la luz focal se encenderá de modo que pueda localizar la posición correcta para la medición en la frente.
- Press and hold the forehead button, the spotlight will come ON allowing you to locate the correct position for a forehead reading.
- Prima sem soltar o botão da testa, o foco está LIGADO, podendo localizar a posição correcta para a medição da temperatura na testa.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé : la lumière s'allume et vous pouvez ajuster la position pour une mesure correcte.
- Die Stirntaste drücken und gedrückt halten. Nun geht die Taschenlampe AN und Sie können nach der entsprechenden Position für eine Stirnmessung suchen.
- Premere e tenere premuto il pulsante fronte, il faretto è ON e in questo modo si può localizzare la posizione corretta per la misurazione alla fronte.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk czola, zapali się lampka, pomagając znaleźć właściwe miejsce do pomiaru.
- Нажмите и удерживайте кнопку измерения температуры тела на лбу. Загоревшийся фонарик поможет вам выбрать правильное положение для измерения.

4

Sano  
Healthy  
Saudável  
En bonne santé  
Gesund  
Sano  
Zdrowy  
Здоровый



Fiebre  
Fever  
Febre  
Fièvre  
Fieber  
Febbre  
Gorączka  
Лихорадка




5

Para una nueva medición esperar 30 segundos  
For a new measurement wait 30 seconds  
Para uma nova medição aguarde 30 segundos  
Pour une nouvelle mesure attendez 30 secondes

Für eine neue Messung 30 Sekunden warten  
Per una nuova misura attendere 30 secondi  
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30 sekund  
Для нового измерения подождите 30 секунд

Medición de objetos · Objects measurement · Medição de objetos · Mesure des objets  
Objekte messung · Oggetti di misura · Mierzonych obiektów · Медида де объекты

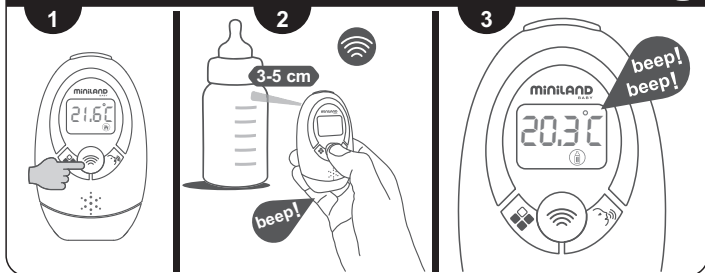

89083 thermoadvanced plus

© Miniland, S.A. 2016

2050289083