


thermotalk plus minilandbaby.com


Medición en el oído · Measurement in the ear · Medição no ouvido · Mesure dans l'oreille
Messung in der ear · Misura nell'orecchio · Pomiar w uchu · Измерение в ушном

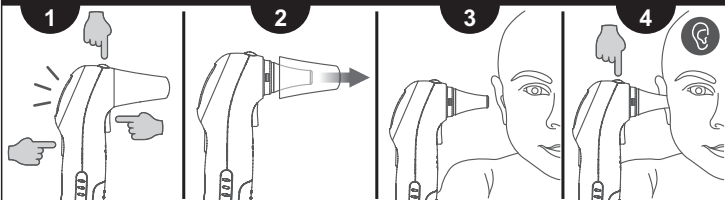

Limpiar sonda
Clean probe
Sonda limpa
Sonde propre
Sonde reinigen
Sonda pulita
Czyste sonda
Чистый зонд

- 8 Para una nueva medición esperar 30 segundos
For a new measurement wait 30 seconds
Para uma nova medição aguarde 30 segundos
Pour une nouvelle mesure attendez 30 secondes
- Für eine neue Messung 30 Sekunden warten
Per una nuova misura attendere 30 secondi
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30 sekund
Для нового измерения подождите 30 секунд


Medición en la frente · Forehead measurement · Medição de testa · Front mesure
Messen front · Misurazione del fronte · Pomiar na czole · Измерение на лбу

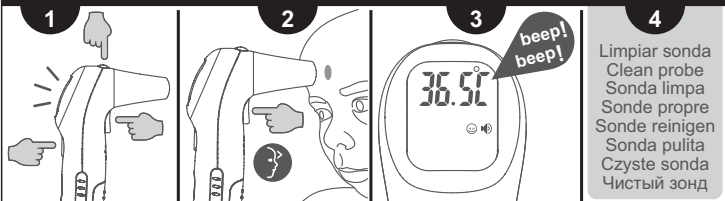


- 5 Para una nueva medición esperar 30 segundos
For a new measurement wait 30 seconds
Para uma nova medição aguarde 30 segundos
Pour une nouvelle mesure attendez 30 secondes
- Für eine neue Messung 30 Sekunden warten
Per una nuova misura attendere 30 secondi
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30 sekund
Для нового измерения подождите 30 секунд



1

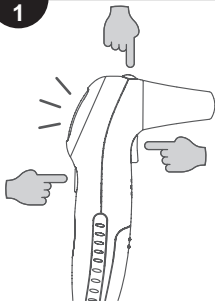


2

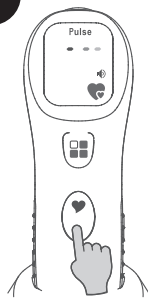

3

Colocar el dedo sin pulsar
Place finger without pressing
Coloque o dedo sem pressionar
Placez doigt sans appuyer sur
Legen Sie Ihren Finger ohne Druck
Posizionare il dito senza premere
Umieść palec bez naciskania
Поместите свой палец, не нажимая

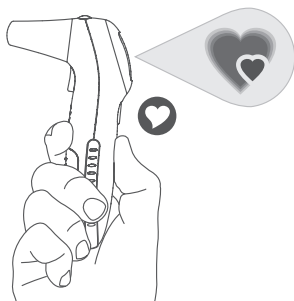

4

Esperar 15 segundos
Wait 15 seconds
Aguarde 15 segundos
Attendre 15 secondes
15 sekunden warten
Attendere 15 secondi
Odczekaj 15 sekund
Подождите 15 секунд

5



6

Para una nueva medición esperar 30 segundos
For a new measurement wait 30 seconds
Para uma nova medição aguarde 30 segundos
Pour une nouvelle mesure attendez 30 secondes

Für eine neue Messung 30 Sekunden warten
Per una nuova misura attendere 30 secondi
W przypadku nowego pomiaru odczekać 30 sekund
Для нового измерения подождите 30 секунд